

CONTENEDOR PARA TERAPIAS AVANZADAS ULTRAFRÍO CRYOPORT ELITE™ 28L

Cómo descargar las muestras para el envío

SIGA LAS NORMATIVAS LOCALES SOBRE EL MANEJO Y LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL HIELO SECO




Paso 1

Use el equipo de protección personal (EPP) adecuado para trabajar con temperaturas extremadamente bajas al descargar la carga útil y el hielo seco.




Paso 2

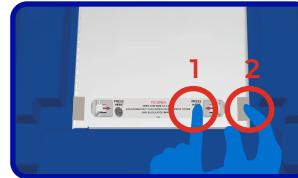

Para abrir la tapa del compartimento de documentos, presione hacia abajo sobre ella mientras oprime cada pestillo lateral, uno a la vez y luego levante la tapa.

Una vez abierta la tapa del compartimento de documentos, retire la cuña azul de la tapa y ciérrela presionando un lado a la vez.

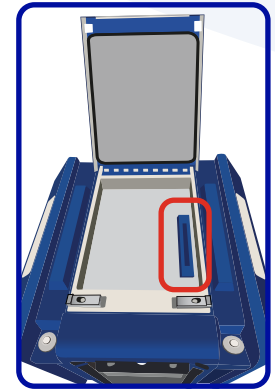


Paso 3




Antes de retirar el precinto numerado, registre el número de serie en toda la documentación pertinente. Retire el precinto numerado con cortadores de alambre/cable.

Paso 4

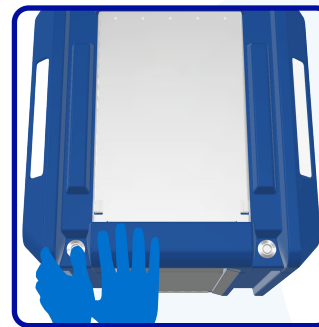


La tapa debe abrirse un lado a la vez. Con una mano, presione hacia abajo la tapa mientras que al mismo tiempo oprime el botón de liberación del pestillo. Al presionar la tapa hacia abajo, se reducirá la resistencia del botón y será más fácil liberar el pestillo.

Paso 5

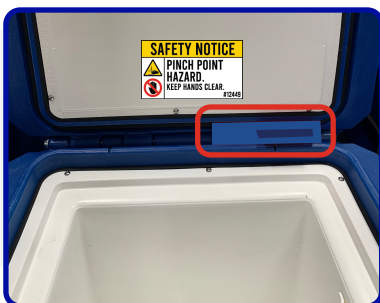

Una vez que la tapa esté abierta, use la cuña para mantenerla abierta y evitar lesiones personales. La cuña de la tapa debe colocarse deslizándola hacia adentro desde cualquiera de los lados de la bisagra (ubicada entre la tapa y la base). La cuña de la tapa se encuentra en el compartimento de documentos.

Paso 6

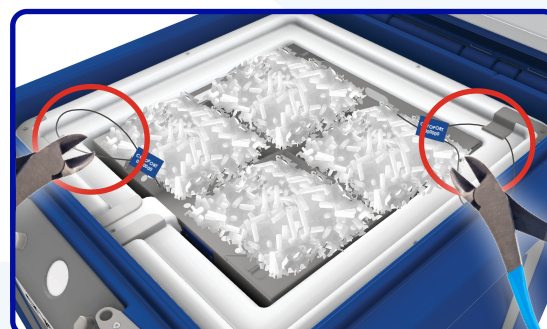

Antes de retirar las bridas de cremallera serializadas, registre el número de serie en toda la documentación pertinente. Retire la brida de cremallera serializada con un alicate/cortador de cables.

CONTENEDOR PARA TERAPIAS AVANZADAS ULTRAFRÍO CRYOPORT ELITE™ 28L


Cómo descargar las muestras para el envío

SIGA LAS NORMATIVAS LOCALES SOBRE EL MANEJO Y LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL HIELO SECO



Aplicable a cualquier configuración de embalaje (25, 50 o 70 unidades).


Paso 7

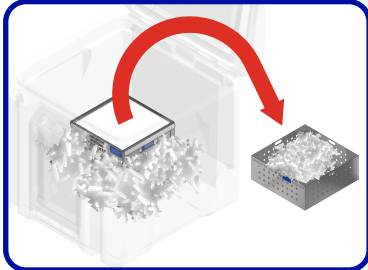

Retire el compartimento superior de hielo seco con el hielo seco que quede en su interior.

NO descargue el hielo seco.


Paso 8

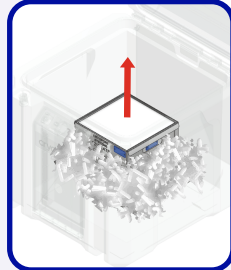

Retire el elevador de carga útil sujetando las asas laterales (con la carga útil en su lugar).

NO descargue el hielo seco.

Paso 9

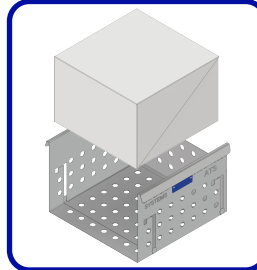


Retire la carga útil del elevador de carga útil y colóquela en el entorno de congelación adecuado.

NOTA: Producto crítico sensible a la temperatura. Mantenga al mínimo el tiempo que la carga útil permanece fuera del contenedor. Coloque la carga útil en un congelador activo lo antes posible.


NO descargue el hielo seco.

Paso 10

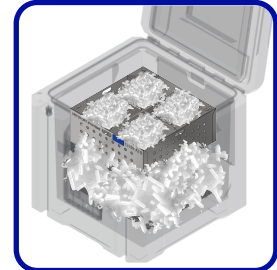


Después de ubicar de manera correcta la carga útil en un congelador, vuelva a colocar el elevador de carga útil en el contenedor y luego el compartimento superior de hielo seco. Prepare el contenedor para su devolución a Cryoport. Si siente alguna resistencia o que no queda el compartimento al ras, retírelo del contenedor, gírelo 90 grados y vuelva a insertarlo.

Paso 11

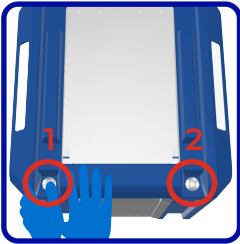

Al cerrar la tapa del contenedor, primero retire la cuña de la tapa. Cierre el contenedor presionando primero la esquina izquierda hasta escuchar un "clic". Luego, presione hacia abajo en el lado derecho hasta que escuche otro "clic" para cerrar la tapa del contenedor. Los "clicks" audibles son una forma de asegurar que ambos pestillos estén completamente cerrados. Vuelva a colocar la cuña de la tapa en el compartimento de documentos.


Paso 12

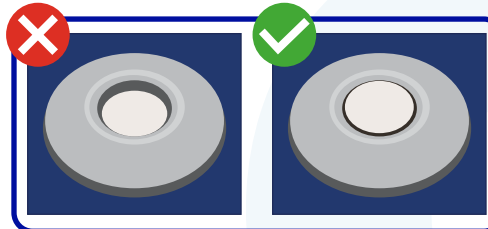

Los botones centrales se liberarán y quedarán nivelados cuando los pestillos estén correctamente cerrados.

NOTA: Como se indicó en el paso anterior, el usuario debe escuchar un "clic" de ambos lados para que se liberen los botones centrales y se cierren los pestillos correctamente.

Paso 13

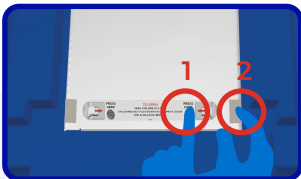

Cuando la empresa repartidora recoja el envío, retirará y agregará etiquetas según sea necesario, y también llevará la bolsa de materiales para el envío de retorno. Se encargarán de desechar el hielo seco y colocarán las etiquetas que indiquen que el contenedor está VACÍO y ya no contiene mercancías peligrosas.

